

The materials and information provided via this brochure are distributed internationally, but not all the products or services found on this brochure are necessarily available in your country or area. Please contact local office or agents to make sure of the availability of the relevant products or services.

Mindray Medical Netherlands B.V.
Drs.Wan Royenstraat 8, 3871 AN Hoevelaken, The Netherlands
Voice: (31-33) 254-4911
Fax: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.
Via Leonardo DA Vinci, 158, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy
Voice: (39-02) 5737-401
Fax: (39-02) 5523-2018

Mindray Medical España S.L.
Avenida Manoteras 38, Edificio B, Bajo B008, 28050-Madrid Spain
Voice: (34-91) 392-3754
Fax: (34-91) 392-3756

Mindray Medical Germany GmbH
Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim, Germany
Voice: (49) 6251-17524-0
Fax: (49) 6251-17524-20

Mindray (UK) Limited
Mindray House, Kingfisher Way, Hinchingsbrooke Business Park,
Huntingdon, Cambs, PE29 6FN
Voice: (44) 1480-416-840
Fax: (44) 1480-436-588

Mindray Medical France SARL
Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, France
Voice: (33-1) 4513-9150
Fax: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Sweden AB
Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, Sweden
Voice: (46) 8 555 54 121

Fax: (46) 8 555 54 101
Mindray Medical Rus Co.Ltd
2 Zvenigorodskaya Street, 13, bld 41, 123022 Moscow, Russia
Voice: (7-499) 553-6036
Fax: (7-499) 553-6039

Mindray Medical Colombia S.A.S
Room No.702, Torre UNIKA, Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia
Voice: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil – Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.
Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo - SP,
CEP 05012-020
Voice: (55-11) 3124-8026
Fax: (55-11) 3078-8035

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.
Félix Parra # 175 Colonia. San José Insurgentes Sur Delegación Benito Juárez 03900 México, D.F.
Voice: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Fax: (52-55) 5662-6597

PT.Mindray Medical Indonesia
The East 11th Floor, Unit 08 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 3.2 No.1 Jakarta 12950
Voice: (6221) 2902-7280
Fax: (6221) 2902-7283

Mindray Medical Egypt
Ground Floor-11 El Imam Metwally El Sharawi Street,
Sheraton Heliopolis - El Nozha, Cairo, Egypt
Voice: (2) 02 22691047
Fax: (2) 02 22691046

Mindray Medical Australia
ADD: 19 Harker St, Burwood VIC 3125, Australia
Voice: (61-3) 9830 6610
Fax: (61-2) 9550 2841

Mindray Medical Nigeria

ADD: 1004 Estate,Victoria Island, Lagos, Nigeria
Voice: (+234) 7030682053

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)
16th floor, Building No. 9-B, DLF Cyber City, DLF Phase- 3, Gurgaon- 122002, Haryana
Voice: (91-124) 4632-488
Fax: (91-124) 4632499


Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)
B-404, City Point, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai, 400 059, India
Voice: (91-22) 4020-0000
Fax: (91-22) 4020-0011

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.
KÖYALTİ MEVKİİ 29 EKİM CAD.N.1 KUYUMÇUKENT 2.NO.PLZ.3.KT. D.1- 9 34520 BAĞÇELİEVLER/YENİBOSNA, İSTANBUL, TÜRKİYE
Voice: (90-212) 482 08 77
Fax: (90-212) 482 08 78

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti. Branch Office Ankara
TURAN GÜNEŞ BULVARI ALEKSANDER DÜBÇEK CAD. NO:18/A ÇANKAYA/ANKARA, TÜRKİYE
Voice: (90-312) 441 96 92
Fax: (90-312) 441 96 93

Mindray Medical Vietnam Co.,Ltd.
Unit 2, 4th Floor, "B" Building, Broadway Office Park, 102 Nguyen Luong Bang Blvd., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Voice: (84) 8 5413-6970
Fax: (84) 8 5413-6971

Mindray Medical Thailand Limited
1768 Thai summit Tower Room 407, 4th floor, New petchaburee Road, Kwaeng Bangkok, Khet Huai Khwang, Bangkok 10320, Thailand
Voice: (66) 2652-7288
Fax: (66) 2652-7266

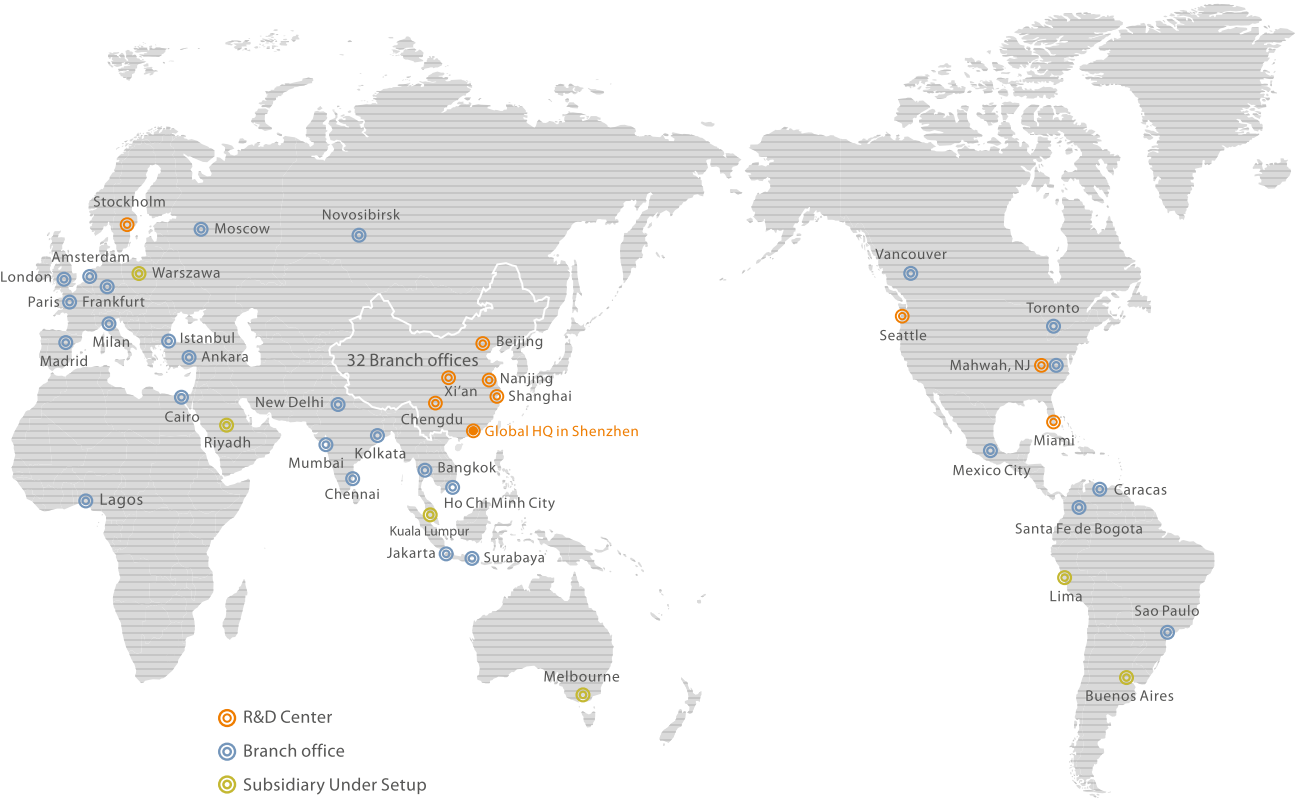

HyBase 8300/8500

Mesa Cirúrgica



mindray
healthcare within reach

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com Mindray is listed on the NYSE under the symbol"MR"	mindray healthcare within reach are registered trademarks or trademarks owned by Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD. ©2014 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice. Pls refer to user manual for manufacturer information P/N: PT-BR-HyBase 8300/8500-210X285X16P-20150310 CE mindray
--	---



HyBase 8300/8500

Mesa Cirúrgica Eletro-hidráulica

Desenvolvida para situações cirúrgicas cada vez mais complexas, a HyBase 8300/8500 vem com capacidade de carga de peso extremo, até 460 kg, garantindo a mais alta segurança e estabilidade em qualquer posição. Com deslizamento longitudinal de até 480 mm, é ideal para cirurgias cardiovasculares com arcos em C. O tampo de mesa modular permite que ela seja adaptada para as necessidades de várias disciplinas cirúrgicas.

- Deslizamento longitudinal de até 480 mm para livre acesso ao arco cirúrgico em C
- Capacidade de carga de peso extremo de 460 kg com alta segurança e estabilidade
- Tampo de mesa modular adaptado para as necessidades de vários procedimentos cirúrgicos
- Sistema anticolisão inteligente para evitar que os componentes da mesa se choquem durante a movimentação
- Colchão de decompressão com design antiestático, à prova d'água e sem costura
- Posição mais baixa da mesa de 575 mm para neurocirurgia
- Sistema de controle remoto IR sem fio para livre movimentação na sala de cirurgia

HyBase 8300/8500

Mesa Cirúrgica Eletro-hidráulica



HyBase 8300/8500

Mesa Cirúrgica Eletro-hidráulica




Rodízios elétricos com acionamento automático para frenagem estável

Capacidade extrema de peso

A HyBase 8300/8500 oferece o mais alto nível de segurança e estabilidade. Com máxima capacidade de peso de 460 kg, a mesa foi projetada para acomodar os pacientes cirúrgicos mais leves e mais pesados em qualquer posição para operação, sendo ideal para pacientes obesos.

Deslizamento Longitudinal Amplo

Com deslizamento longitudinal de até 480 mm, a HyBase 8300/8500 permite ótimo acesso com o arco em C, sem reposicionamento do paciente para fins de imagem, o que a torna ideal para cirurgias como as cardiovasculares. Além disso, o tampo da mesa em fibra de carbono (opcional) proporciona qualidade de imagem excelente.

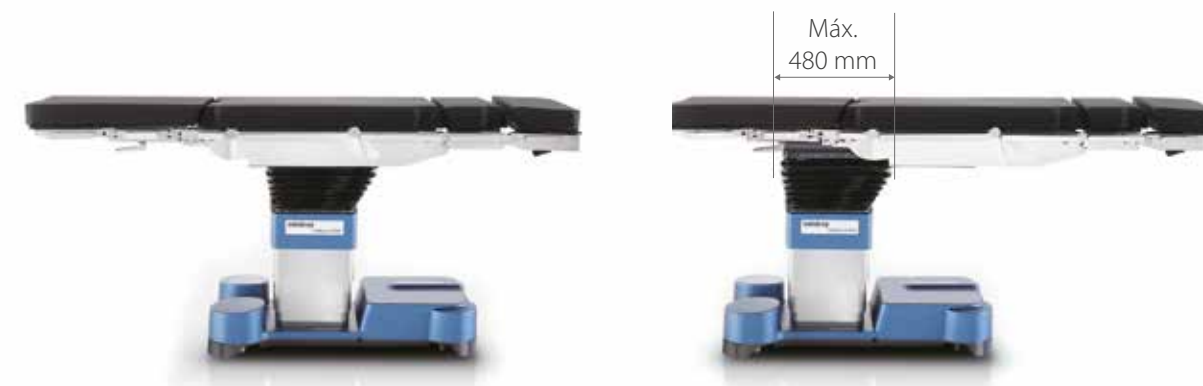

Estofamento para Descompressão Multicamadas

Com estofamento em Espuma Especial e desenho de camadas múltiplas, a HyBase 8300/8500 proporciona distribuição de pressão excelente, evitando de modo significativo a principal causa das úlceras de decúbito, reduzindo a taxa de risco pós-operatório e acelerando a recuperação do paciente. Além disso, o estofamento é à prova d'água e fácil de limpar devido à tecnologia de solda por ultrassom e material GORE-TEX.



Sistema Anticolisão Inteligente

Na junta de conexão da placa de perna, existe um módulo inteligente que reconhece todos os tipos de componentes da mesa e emparelha os dados anticolisão automaticamente. Assim, o sistema anticolisão inteligente pode monitorar as posições do tampo da mesa durante movimentação como placa para sentar, placas de perna, e assim por diante, evitando a colisão de componentes da mesa.



Altura Mais Baixa da Mesa

Com a menor altura de mesa de 575 mm para neurocirurgias, o médico pode se sentar e operar confortavelmente.



HyBase 8300/8500

Mesa Cirúrgica Eletro-hidráulica

Desenho Modular

O desenho modular do tampo da mesa foi projetado para as necessidades de diversos procedimentos cirúrgicos, o que também pode reduzir o custo gasto do hospital, pois somente será necessário comprar o módulo específico para novas cirurgias, e não novas mesas. Com o Sistema de Reconhecimento de Módulo, a mesa reconhece o tipo de módulo e atualiza os dados de movimentação automaticamente.





Sala de Cirurgia Cardíaca



Sala de Cirurgia Ortopédica



Sala de Neurocirurgia



Cirurgia Cardiovascular



Placa de extensão em fibra de carbono para acesso em 360° ao arco em C, cirurgia cardiovascular

Cirurgia Ortopédica



Extensão ortopédica em fibra de carbono para acesso em 360° ao arco em C



Placa de extensão em fibra de carbono para acesso em 360° ao arco em C, cirurgia espinal

Neurocirurgia



Altura mais baixa da mesa com Braçadeira para cabeça (DORO) para Neurocirurgia



Posição de cadeira de praia para Neurocirurgia

HyBase 8300/8500

Mesa Cirúrgica Eletro-hidráulica

Posicionamento Flexível do Paciente

Cirurgia geral



Cirurgia de estomago



Cirurgia Ginecológica e Urológica



Modo reverso, após deslizamento na direção da extremidade da cabeça



Modo reverso, com placa de extensão



Modo reverso, posicionamento ergonômico com estribos

Cirurgia Otorrinolaringológica



Menor altura da mesa para cirurgia otorrinolaringológica

Cirurgia Renal



Posição lateral com placa de cabeça dupla

Cirurgia Endoscópica




Melhor acesso a pacientes com placa de perna com articulação dupla

HyBase 8300/8500


Mesa Cirúrgica Eletro-hidráulica

Especificações técnicas


Dimensões	
Comprimento (Unidade principal)	970 mm
Peso sem estofamento	HyBase 8300: 575-1.075 mm/HyBase 8500: 700-1.200 mm
Largura sem trilho lateral	520 mm
Largura com trilho lateral	590 mm

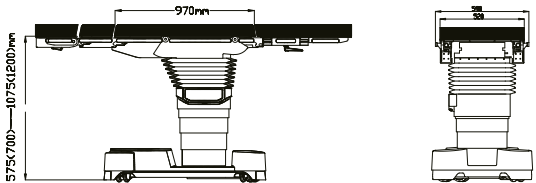


Posição Trendeleburg	
Trendeleburg	HyBase 8300: Máx. 36° / HyBase 8500: Máx. 46°
Trendeleburg reverso	HyBase 8300: Máx. 36° / HyBase 8500: Máx. 46°

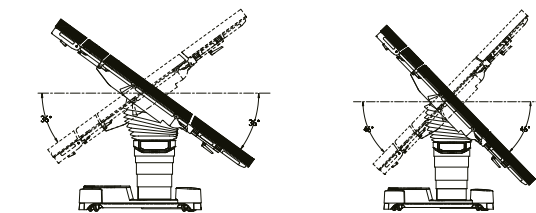


Placas de perna	
Placas de perna para cima	Máx. 80°
Placas de perna para baixo (Com deslizamento)	Máx. 90°
Placas de perna para baixo (Sem deslizamento)	Máx. 100°

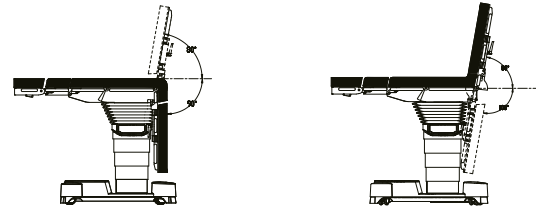


Posição Reflexa	
Posição Reflexa	110°
Trendeleburg	30°
Ponto de montagem para cima	40°

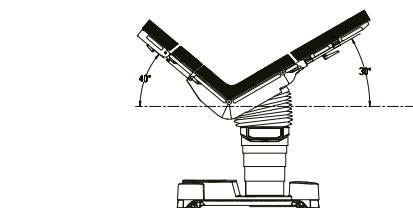


Deslizamento longitudinal (opcional)	
Deslizamento longitudinal	Máx. 480 mm

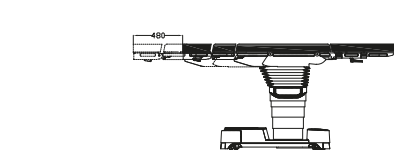


Inclinação lateral	
Inclinação para a esquerda	HyBase 8300: Máx. 26° / HyBase 8500: Máx. 36°
Inclinação para a direita	HyBase 8300: Máx. 26° / HyBase 8500: Máx. 36°

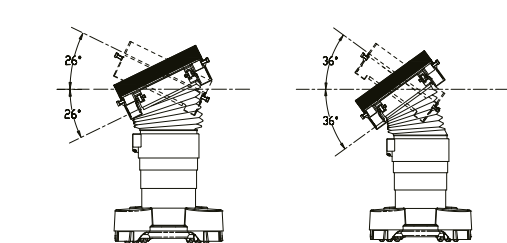


Placa posterior	
Placa posterior para cima	Máx. 90°
Placa posterior para baixo	Máx. 45°

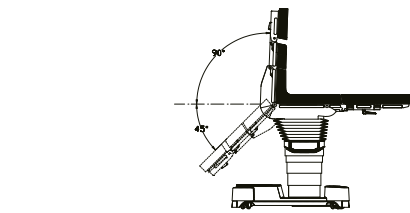

Placa de cabeça	
Placa de cabeça para cima	Articulação dupla: Máx. 60° / Articulação única: Máx. 45°
Placa de cabeça para baixo	Articulação dupla: Máx. 60° / Articulação única: Máx. 90°

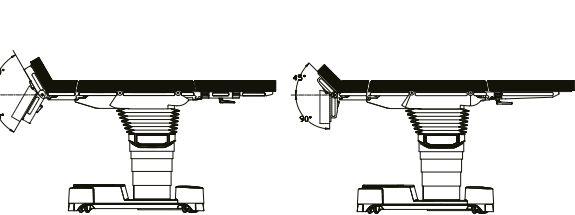

Posição Flexionada	
Posição Flexionada	220°
Trendeleburg Reverso	20°
Ponto de montagem para baixo	20°

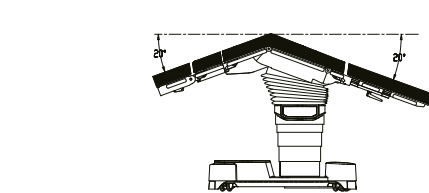

Posição de cadeira de praia	
Placa posterior para cima	80°
Trendeleburg	25°
Placas de perna para baixo	70°

